

KNEO – GEZIELTE ENTLASTUNG

BEI GONARTHROSE
UND MENISKUSSCHÄDEN

KNEO sitzt knapp unter dem Knie und erstreckt sich bis zum Fuß. Durch ihre Konstruktion verschiebt sie beim Gehen und Stehen die Lastlinie und entlastet so die schmerzende Seite des Kniegelenks.

DAS MACHT KNEO BESONDERS

- › NACHGEWIESENE, SOFORTIGE WIRKSAMKEIT
- › EINFACHES AN – UND ABLEGEN
- › RUTSCHT NICHT AM BEIN
- › HOHER TRAGEKOMFORT
- › NAHEZU UNSICHTBAR UNTER DER KLEIDUNG


DIE RICHTIGE WAHL

Die Auswahl der richtigen Orthese hat einen entscheidenden Einfluss auf die Therapie. KNEO ist empfehlenswert bei Patienten mit:

- › eingeschränkter Beweglichkeit
- › ausgeprägter konischer Beinform
- › hohem Weichteilanteil
- › Druckempfindlichkeit
- › Übergewicht
- › Lymph- oder Lipödem
- › ausgeprägter Baker-Zyste oder
- › Berufsgruppen mit überwiegend kniender Tätigkeit



HMV Nr. 23.04.04.3003

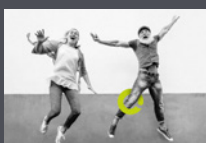

einfach. sicher. aktiv.

Für uns muss eine Orthese einfach in der Handhabung sein, sicher den Schmerz lindern und dafür sorgen, dass Sie wieder aktiv am Leben teilhaben können.


veomedical.de

veomedical[®] GmbH · Enzianweg 8 · 50259 Pulheim
hallo@veomedical.de

KNEO – DAS WIRKPRINZIP KURZ ERKLÄRT

LASTUMVERTEILUNG

Beim Gehen und Stehen wirkt die gesamte Gewichtskraft auf die Orthesensohle. Diese Kraft wiederum wird über die anatomisch geformte Schiene so auf den Unterschenkel umgelenkt, dass die betroffene Kniegelenkseite entlastet wird. Je nach Bedarf wirken entweder Zug- oder Schubkräfte. Die Belastung wird somit von der betroffenen Seite umverteilt.

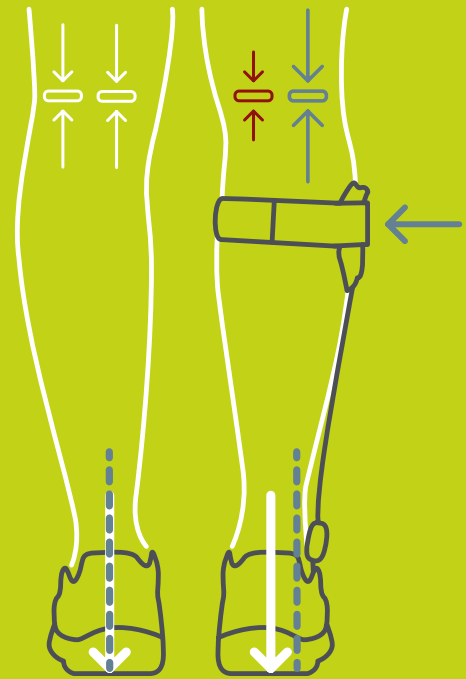

SO REZEPTIEREN SIE RICHTIG:


Musterstraße 5 XXXXX Musterstadt			Arztmittel-/ Hilfsmittel-Nr. 1. Verordnung 23 04 04 30 03 2. Verordnung 3. Verordnung
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status:	
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum:	
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)			
Diagnose(n): - mediale oder laterale Kniearthrose - Verletzungen am Kniegelenk, bei denen der Meniskus entlastet werden muss - nach einer Operation an Bändern und Meniskus zur Sicherung des OP-Ergebnisses - nach Seitenbandverletzungen am Knie, insbesondere bei Instabilität - Verletzungen am Kniegelenk, bei denen eine Entlastung sinnvoll ist			
			Abgabedatum

SO ERMITTELN SIE DIE PASSENDE GRÖSSE:

Messen Sie die Höhe zwischen Boden und Fibulaköpfchen. Die Gesamthöhe der Orthese sollte mindestens 1 cm kürzer sein, als das Maß vom Boden bis zum Fibulaköpfchen. Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich.

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	medial		lateral	
	links	rechts	links	rechts
XS	102K100015L2	102K100015R2	102K100025L2	102K100025R2
S	102K100015L3	102K100015R3	102K100025L3	102K100025R3
M	102K100015L4	102K100015R4	102K100025L4	102K100025R4
L	102K100015L5	102K100015R5	102K100025L5	102K100025R5
XL	102K100015L6	102K100015R6	102K100025L6	102K100025R6
Sondergrößen				
XY	102K100015L9	102K100015R9	102K100025L9	102K100025R9

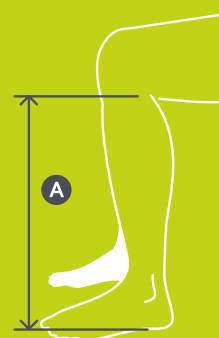

Größe	Höhe A (-1cm)
XS	30
S	34
M	38,5
L	43
XL	47,5

Maße in cm

Bitte geben Sie bei der Bestellung das Maß A und die äußere Knöchelhöhe mit an.